

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальная скорость вращения: ~6000 оборотов/мин.

Напряжение: 24 В

Мощность: 60 Вт

Длина нагревательного элемента: 1,2 м.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Вибромассажный пояс - 1шт.
2. Адаптер - 1 шт.
3. Сетевой шнур - 1 шт.
4. Дополнительная вставка - 1 шт.
5. Сумка - 1 шт.
6. Инструкция - 1шт.



Предлагаем Вашему вниманию серию массажёров для тела "Технологии Здоровья"



Весь ассортимент продукции компании «Технологии здоровья» на сайте:

www.tz66.ru

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 69

Тел. +7 (343) 374-18-00

Уважаемый покупатель!

Компания «Технологии Здоровья» благодарит Вас за покупку вибромассажного пояса BM-NT055. Мы надеемся, что этот прибор подарит Вам массу положительных эмоций, а также сделает Вашу жизнь более комфортной.

Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА:

1. Пояс-массажёр
2. Пульт управления
3. Дополнительная вставка (50 см)
4. Адаптер
5. Сетевой шнур
6. Сумка




ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Подсоедините адаптер к поясу, вставьте вилку в розетку.
2. Оберните поясом нужную часть тела. Убедитесь, что он надёжно и удобно закреплён.
3. Нажмите кнопку «POWER» (питание)(7). Вибромассажный пояс начнёт работать в автоматическом режиме, что будет указано на дисплее (MODE: AUTO).
4. Для изменения режима на ручной нажмите кнопку «MODE» (режим)(8), изменение режима отразится на дисплее (MODE: MANUAL).
В ручном режиме доступен выбор интенсивности массажа. Для того, чтобы выбрать нужную интенсивность нажмите на кнопку «INTENSITY» (интенсивность)(9) соответствующее количество раз (от 1 до 5).
5. Для включения функции теплового воздействия нажмите на кнопку «HEAT» (тепло)(10), повторное нажатие на эту кнопку отключит данную функцию.

6. Прибор оснащён таймером. Т.к. прибор не рекомендуется использовать дольше 20 минут, то таймер по умолчанию установлен на это время. Остаток времени отображается на дисплее (например, TIME: 20). Через 20 минут прибор автоматически выключается.

7. Нажмите кнопку «POWER» (питание)(7) для выключения прибора.

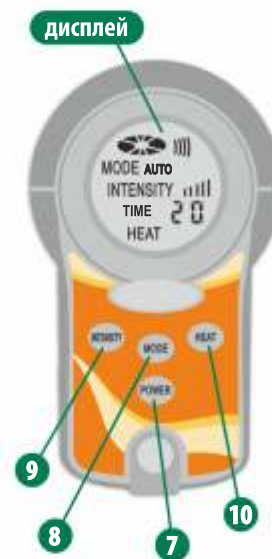



ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 20 МИНУТ.

ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОДНУ ЧАСТЬ ТЕЛА - 10 МИНУТ.

НАЧИНАЙТЕ МАССАЖ С НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ, ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧИВАЯ ЕЁ.
(МАССАЖ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ УЛУЧШАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ, МАССАЖ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ УКРЕПЛЯЕТ МЫШЦЫ).

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ МАССАЖЁР МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ЧАС ДО ЕДЫ, А ТАКЖЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ЕДЫ.

НЕЛЬЗЯ НАДЕВАТЬ ПОЯС НА ВЛАЖНОЕ ТЕЛО. НЕ БЕРИТЕ ПРИБОР ВЛАЖНЫМИ РУКАМИ.

ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПЕРЕРЫВ 20 МИНУТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИБОР ОСТЫЛ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- МЫШЦЫ БРЮШНОГО ПРЕССА
- ЯГОДИЦЫ
- БЁДРА
- ГОЛЕНИ
- СПИНА, ПЛЕЧИ
- ПОЯСНИЦА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не используйте массажный пояс при плохом самочувствии.
2. Выберите удобное положение тела, вам должно быть комфортно. Ложиться на массажные механизмы нельзя.
3. Не рекомендуется использовать массажный пояс беременным женщинам; людям, страдающим сердечными заболеваниями, высоким/низким давлением, сердечной или почечной недостаточностью; детям.
4. При серьёзных проблемах с позвоночником или после операций массаж может быть противопоказан, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Нельзя эксплуатировать прибор при температуре окружающей среды выше 37°C.
2. Храните массажёр вдали от воды, не допускайте попадание на массажёр воды или другой жидкости. Не используйте прибор в ванной комнате, сауне, а также в местах с повышенной влажностью воздуха. Беречь от огня.
3. Не разбирайте массажёр самостоятельно. При возникновении неполадок обратитесь в сервисный центр.
4. Нельзя переносить прибор за сетевой шнур. При отключении из сети держитесь за вилку, а не тяните за шнур.
5. Нельзя ставить на прибор тяжёлые предметы.
6. Пожалуйста, выключайте прибор из розетки после его эксплуатации, а также перед чисткой.
7. Храните массажёр в недоступном для детей месте.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийное обслуживание прибора - 6 месяцев с даты продажи при соблюдении правил эксплуатации. Компания оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках Закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством страны.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия действительна только при правильном и чётком заполнении гарантийного талона с указанием модели изделия, даты продажи, чёткими печатями фирмы-продавца. Компания оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если гарантийный талон не предоставлен или содержит неполную / неразборчивую информацию.
2. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т. д.;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - дефекты, возникшие в результате отклонений от государственных технических стандартов параметров питающих сетей.
3. Настоящая гарантия не распространяется на детали отделки, элементы питания и прочие детали с ограниченным сроком использования, которые подлежат износу.
4. Гарантия не распространяется на товар, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил эксплуатации или хранения, вследствие действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Вибромассажный пояс для коррекции фигуры
Модель	ВМ-НТ055
Дата продажи	« ___ » _____ 20__ г.
Печать продавца:	

С правилами и условиями эффективной и безопасной эксплуатации прибора, а также с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Комплектность и исправность прибора проверены в присутствии покупателя.

ФИО и подпись покупателя