

#### УХОД ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- ПЕРЕД УХОДОМ ЗА ИЗДЕЛИЕМ, ОТКЛЮЧИТЕ ЕГО ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ. ДАЙТЕ ПРИБОРУ ОСТЫТЬ.
- ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА ПРОТРИТЕ МАССАЖНУЮ НАКИДКУ МЯГКОЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНЬЮ.
- КОРПУС ПРИБОРА НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ. ЕГО НЕЛЬЗЯ МЫТЬ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ ИЛИ ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ В ПРИБОР.
- НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОЮЩИМИ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ, А ТАКЖЕ АГРЕССИВНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ОЧИСТКИ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение: 12 В  
Мощность: 18 Вт  
Частота: 50/60 Гц

**Условия эксплуатации :** только в сухих помещениях при температуре от +5 °С до +37°С

**Условия хранения:** в сухом, прохладном месте при температуре от +5 °С до +37°С

**Массажная накидка предназначена для персонального (непрофессионального) использования.**

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Роликовая массажная накидка - 1шт.
2. Съёмная накидка - 1шт.
3. Сетевой шнур - 1 шт.
4. Шнур питания от «прикуривателя» автомобиля - 1 шт.
5. Инструкция - 1шт.

*Предлагаем Вашему вниманию серию массажёров для тела "Технологии Здоровья"*



Весь ассортимент продукции компании «Технологии здоровья» на сайте:

**[www.tz66.ru](http://www.tz66.ru)**

### СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 69

Тел. +7 (343) 374-18-00

Уважаемый покупатель!

Компания «Технологии Здоровья» благодарит Вас за покупку роликовой массажной накидки BM-HT020. Мы надеемся, что этот прибор подарит Вам массу положительных эмоций, а также сделает Вашу жизнь более комфортной.

Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию в хорошем состоянии для возможного обращения к ней в случае необходимости. Обратите особое внимание на раздел «Меры предосторожности».


Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и дополнения к описанию нашей продукции. Изменения могут вноситься без предварительного уведомления.

#### ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА:

1. Съёмная накидка.
2. Массажные ролики.
3. Вибромеханизмы.
4. Разъём для подключения питания.
5. Эластичный ремень для крепления к креслу.
6. Карман для пульта управления.
7. Пульт управления.
8. Сетевой шнур.
9. Шнур питания от «прикуривателя» автомобиля.



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

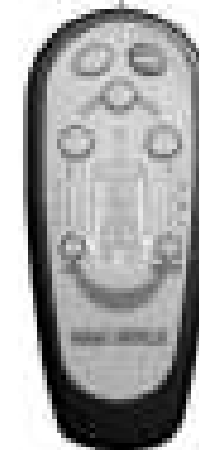

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Разместите массажную накидку на кресле/стуле и закрепите её с помощью эластичного ремня (5).
2. Вставьте штекер сетевого шнура (8) в разъём для подключения питания (4) и подключите к сети. При использовании в автомобиле используйте шнур питания от «прикуривателя» (9).
3. При необходимости закрепите съёмную накидку (1) на верхней части спинки. Вы можете использовать её во время массажа или не использовать, в зависимости от того, как Вам комфортнее.

4. Удобно расположитесь в кресле. Нажмите кнопку «POWER» (вкл/выкл). Осуществите настройки с помощью пульта управления.  
Кнопка “Full” - Массаж всей спины (длительность программы 15 минут).  
Кнопка “Upper” - Массаж верхней части спины (длительность программы 15 минут).  
Кнопка “Lower” - Массаж нижней части спины (длительность программы 15 минут).  
Кнопка “Skill” - Вибромассаж бёдер (Вам доступно 3 режима вибромассажа. Режимы переключаются нажатием кнопки “Skill”)  
Кнопка “Strength” - Интенсивность вибромассажа бёдер (Вам доступно 3 режима: L - низкая интенсивность, M - средняя интенсивность, H - высокая интенсивность. Режимы переключаются нажатием кнопки “Strength”)

*Вибромассаж можно использовать и как отдельную функцию, и как дополнение к роликовому массажу. В любом случае, вы получите массу пользы: вибромассаж улучшает кровоснабжение и помогает взбодриться.*

Кнопка «DEMO» - Демонстрационный режим (длительность программы 2 минуты). В данном режиме вы сможете за непродолжительное время ознакомиться со всеми режимами массажной накидки.

5. После завершения настроек, поместите пульт управления в специальный карман с правой стороны сиденья и наслаждайтесь массажем.



#### **ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА:**

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 25 МИНУТ.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ МАССАЖНУЮ НАКИДКУ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ЧАС ДО ЕДЫ, А ТАКЖЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ЕДЫ.

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ МАССАЖ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД СНОМ. МАССАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЛЁГКОЕ ВОЗБУЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ, ЧТО МОЖЕТ НАРУШИТЬ СОН.

ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПЕРЕРЫВ 20 МИНУТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИБОР ОСТЫЛ.

6. По окончании заданного времени прибор автоматически отключится. Вы можете прервать выполнение массажа в любой момент, нажав кнопку «POWER» (вкл/выкл), при этом массажный блок вернется в крайнее нижнее положение. После проведения сеанса массажа, пожалуйста, отключите прибор от питания во избежание короткого замыкания.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. При использовании массажной накидки нагрузка на её спинку и сиденье не должна превышать 135 кг.

2. Не используйте массажную накидку при плохом самочувствии.

3. Запрещается использовать накидку при повышенной потливости.

4. Не используйте накидку во время сна. Не засыпайте по время эксплуатации массажной накидки.

5. Не рекомендуется использовать накидку беременным женщинам; людям, страдающим сердечными заболеваниями, высоким/низким давлением, сердечной или почечной недостаточностью; людям с кардиостимулятором или электронными имплантатами; детям.

6. При серьёзных проблемах с позвоночником или после операций массаж может быть противопоказан, **пожалуйста, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.**

#### **ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:**

1. Нельзя эксплуатировать прибор при температуре окружающей среды выше 37°C, а также при повышенной влажности воздуха. Не используйте накидку на улице, она предназначена только для использования в помещении или автомобиле.

2. Храните массажную накидку вдали от воды, не допускайте попадание на неё воды или другой жидкости. Не используйте прибор в ванной комнате, сауне, а также в местах с повышенной влажностью воздуха. В случае непреднамеренного попадания воды на массажную накидку немедленно выключите её и отключите от сети питания.

3. Беречь от огня.

4. Не разбирайте прибор самостоятельно. При возникновении неполадок обратитесь в сервисный центр.

5. Никогда не пользуйтесь массажной накидкой в постели.

6. Не допускайте контакта с острыми предметами. Не ставьте на неё тяжёлые предметы. Нельзя вставать на неё ногами. Не деформируйте массажную накидку.

7. Не используйте накидку в помещениях, где распылены аэрозоли.

8. Нельзя переносить прибор за сетевой шнур. При отключении из сети держитесь за вилку, а не тяните за шнур.

9. Храните массажную накидку в коробке, в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

#### **ГАРАНТИЯ:**

Гарантийное обслуживание прибора — 6 месяцев с даты продажи при соблюдении правил эксплуатации. При обнаружении дефектов, возникших по вине производителя, в течение гарантийного срока прибор подлежит гарантийному ремонту (срок которого не может превышать 45 рабочих дней). Однако, компания оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии.

Все условия гарантии действуют в рамках Закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством страны.

#### **ГАРАНТИЯ:**

Гарантийное обслуживание прибора — 6 месяцев с даты продажи при соблюдении правил эксплуатации. При обнаружении дефектов, возникших по вине производителя, в течение гарантийного срока прибор подлежит гарантийному ремонту (срок которого не может превышать 45 рабочих дней). Однако, компания оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках Закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством страны.

И талон не предоставлен или содержит неполную / неразборчивую информацию.

2. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- механические повреждения;

- повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т. д.;

- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

- дефекты, возникшие в результате отклонений от государственных технических стандартов параметров питающих сетей.

3. Настоящая гарантия не распространяется на детали отделки, элементы питания и прочие детали с ограниченным сроком использования, которые подлежат износу.

4. Гарантия не распространяется на товар, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил эксплуатации или хранения, вследствие действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.

#### **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Наименование изделия	Роликовая массажная накидка шиацу
Модель	BM-HT020
Дата продажи	«___» _____ 20__ г.
Печать продавца:	

С правилами и условиями эффективной и безопасной эксплуатации прибора, а также с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.  
Комплектность и исправность прибора проверены в присутствии покупателя.

ФИО и подпись покупателя

---