


### УХОД ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАССАЖЁРА СНИМИТЕ НАСАДКУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЕЁ ОЧИСТИТЬ. МЯГКОЙ САЛФЕТКОЙ ПРОТРИТЕ КОРПУС МАССАЖЁРА.
  - НАСАДКУ МАССАЖЁРА ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ ВОДОЙ. ЗАТЕМ ПРОТРИТЕ НАСУХО МЯГКОЙ САЛФЕТКОЙ.
- КОРПУС ПРИБОРА НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ. ЕГО НЕЛЬЗЯ МЫТЬ.  
НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОЮЩИМИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОРПУСА ПРИБОРА.

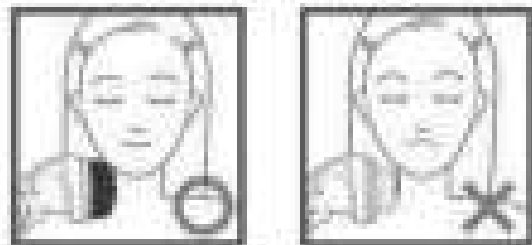

*Внимание! При массаже шеи и плеч используйте защитную насадку-сетку, для предотвращения попадания волос в прибор.*


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение: 220 В  
Мощность: 25 Вт  
Частота: 50 Гц

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Массажёр - 1шт.
2. Защитная насадка-сетка - 1шт.
3. Насадки - 4 шт.
4. Инструкция - 1шт.

*Предлагаем Вашему вниманию серию массажёров для тела "Технологии Здоровья"*

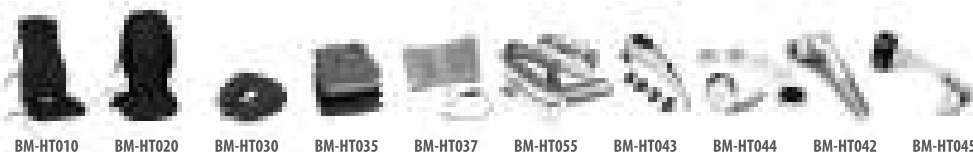

Весь ассортимент продукции компании «Технологии здоровья» на сайтах:  
[www.tz66.ru](http://www.tz66.ru) [www.t-zdor.ru](http://www.t-zdor.ru) [технологии-здоровья.рф](http://технологии-здоровья.рф)

## СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

г. Екатеринбург  
ИП Федоров А.А.  
ул. Первомайская, 69  
Тел. +7 (343) 368-18-00

МО, Дмитровский р-н, г.п. Деденево  
ООО «Технологии здоровья»  
Московское шоссе, д. 1  
Тел. +7 (495) 792-51-50

Уважаемый покупатель!

Компания «Технологии Здоровья» благодарит Вас за покупку вибромассажёра «BODY SHAPER», модель BM-HT044. Мы надеемся, что этот прибор подарит Вам массу положительных эмоций, а также сделает Вашу жизнь более комфортной.

Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

### ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА:

1. Массажная головка
2. Инфракрасный излучатель
3. Регулятор скорости вращения
4. Ручка с антискользящим покрытием
5. Сетевой шнур
6. Защитная насадка-сетка: предотвращает попадание волос в прибор (предназначена для массажа плеч и шеи).



*Внимание! Защитную насадку-сетку можно использовать только с плоской насадкой и насадкой с волнистой поверхностью. Никогда не используйте её с роликовой или пилинговой насадками.*

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Выберите нужную насадку:

#### ПЛОСКАЯ НАСАДКА

Предназначена для мягкого массажа спинных, плечевых и шейных мышц; отлично снимает напряжение и усталость, улучшает кровообращение и питание межпозвоночных хрящей. Ежедневный массаж мышц спины и плеч - прекрасный способ защитить себя от появления остеохондроза.


#### НАСАДКА С ВОЛНИСТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Предназначена для массажа рук, бёдер и других чувствительных участков Вашего тела. При ее использовании массажёр делает лёгкие дробные движения. Движение лучше начинать с нижней части рук/ног к сердцу - так массаж будет не только бороться с жировой прослойкой, но и усилит ток лимфы. Это обеспечит Вам хорошее кровообращение и избавит от усталости.




### РОЛИКОВАЯ НАСАДКА

Предназначена для борьбы с растяжками и целлюлитом, способствует выведению шлаков и токсинов из организма. Максимальный эффект достигается при использовании специального антицеллюлитного геля или массажного масла. Восемь круглых роликов усиливают впитывание и прекрасно тонизируют кожу.

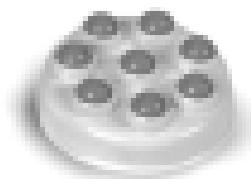

### ПИЛИНГОВАЯ НАСАДКА

Предназначена для удаления мозолей и ороговевшей кожи ступней. Отполирует и отшелушит. Стопы будут мягче и нежнее. Идеальна для профилактики трещин. Просто незаменима для качественного педикюра в домашних условиях.

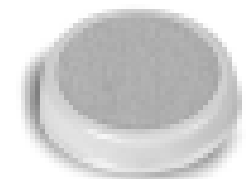

2. Снимите защитную насадку - сетку (рис. 1). Снимите насадку (рис. 2): на массажной головке расположены 2 выемки для удобства снятия насадки. Наденьте нужную Вам насадку на массажную головку. При необходимости наденьте защитную насадку-сетку: аккуратно вставьте её в пазы на массажёре, и поверните защитную насадку-сетку против часовой стрелки до упора.

3. Вставьте вилку в розетку.

4. Поверните регулятор скорости из положения OFF по часовой стрелке. Продолжайте поворачивать его пока не достигните нужной Вам скорости. При включении массажёра автоматически активируется функция инфракрасного прогрева.

5. Держать массажёр можно 2 способами:

- за ручку (рис. 3)

- по центру основания (рис. 4)

**Выберите удобный для Вас способ и приступайте к процедуре.**



рис. 1

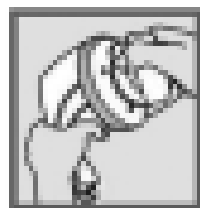


рис. 2



рис. 3


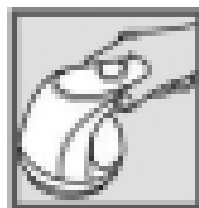


рис. 4

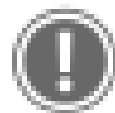

### ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА:

МАССАЖ МОЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НЕ РАНЕЕ ЧЕМ, ЧЕРЕЗ ЧАС ПОСЛЕ ПРИЁМА ПИЩИ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ МАССАЖА ОДНОГО УЧАСТКА ТЕЛА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 10 МИНУТ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ МАССАЖА РЕКОМЕНДУЕТСЯ УВЕЛИЧИВАТЬ СКОРОСТЬ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ. В НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕБОЛЬШУЮ СКОРОСТЬ ВИБРАЦИИ, БЛИЖЕ К ОКОНЧАНИЮ СЕАНСА - МАКСИМАЛЬНУЮ.

СЕАНС МАССАЖА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 20 МИНУТ. ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПЕРЕРЫВ 20 МИНУТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИБОР ОСТЫЛ.

6. После эксплуатации поверните регулятор скорости против часовой стрелки до положения OFF (до щелчка), затем выньте вилку из розетки.

### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Не используйте прибор, если Вы беременны, если у Вас большое сердце или недавние травмы. Если Вы не уверены можно ли Вам пользоваться прибором, проконсультируйтесь с врачом перед его использованием.

2. Не используйте прибор для массажа головы.

3. Нельзя эксплуатировать прибор при температуре окружающей среды выше 37°C.

4. Если во время эксплуатации прибора Вы испытываете тошноту, головокружение, боли или другие неприятные симптомы, пожалуйста, незамедлительно обратитесь к врачу.

5. Храните вибромассажёр в недоступном для детей месте.

6. Храните массажёр вдали от воды, не допускайте попадание на массажёр воды или другой жидкости. Не используйте прибор в ванной комнате, сауне, а также в местах с повышенной влажностью воздуха.

7. Не разбирайте массажёр самостоятельно. При возникновении неполадок обратитесь в сервисный центр.

8. Нельзя переносить прибор за сетевой шнур. При отключении из сети держитесь за вилку, а не тяните за шнур.

9. Пожалуйста, выключайте прибор из розетки после его эксплуатации, а также перед чисткой.

### ГАРАНТИЯ:

Гарантийное обслуживание прибора - 6 месяцев с даты продажи при соблюдении правил эксплуатации. Компания оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках Закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством страны.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия действительна только при правильном и чётком заполнении гарантийного талона с указанием модели изделия, даты продажи, чёткими печатями фирмы-продавца.

Компания оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если гарантийный талон не предоставлен или содержит неполную / неразборчивую информацию.

2. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- механические повреждения;

- повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т. д.;

- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

- дефекты, возникшие в результате отклонений от государственных технических стандартов параметров питающих сетей.

3. Настоящая гарантия не распространяется на детали отделки и прочие детали с ограниченным сроком использования, которые подлежат износу.

4. Гарантия не распространяется на товар, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил эксплуатации или хранения, вследствие действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Вибромассажёр «BODY SHAPER»
Модель	BM-HT044
Дата продажи	«__» _____ 20__ г.
Печать продавца:	

С правилами и условиями эффективной и безопасной эксплуатации прибора, а также с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Комплектность и исправность прибора проверены в присутствии покупателя.

\_\_\_\_\_  
ФИО и подпись покупателя